



Aesculap Endoscopic Technology

EndoNovitas

Innovation, Flexibilität und Partnerschaft

Inhalt

Aesculap® Caiman®

- Abwinkelbare Instrumente
- Mehr Flexibilität
- Hohe Versiegelungsqualität

23

Aesculap® Caiman® – Die neue Flexibilität der bipolaren Gefäßversiegelung


Geringer Platz im Bauchraum oder schwierige Erreichbarkeit von Strukturen? Trotz anatomischer Herausforderungen eine zuverlässige Versiegelung?

Die Lösung: Caiman abwinkelbare Instrumente

Die Erweiterung der Caiman Familie um ein abwinkelbares 5 mm Gefäßversiegelungsinstrument bietet Ihnen ganz besondere Vorteile.



Erfahren Sie mehr über Caiman in unserer **Caiman App** oder unter www.caiman-aesculap.com

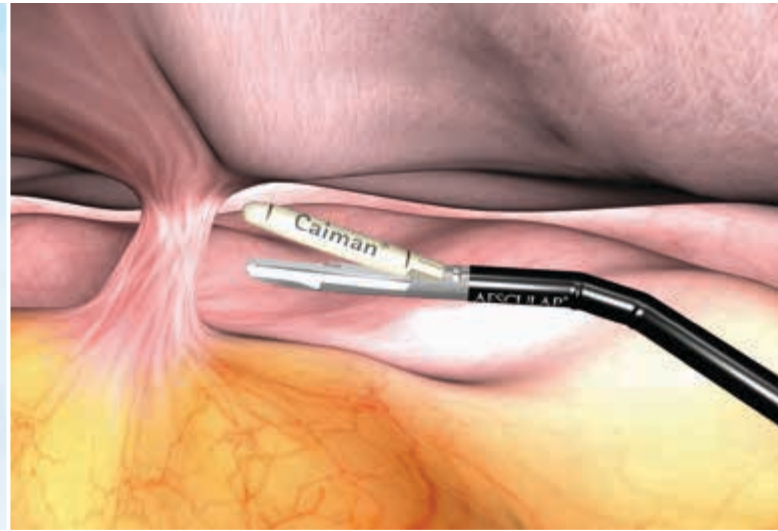


Gefäßversiegelung mit erweiterten Freiheitsgraden

- 80° Abwinkelbarkeit der Instrumentenspitzen
- Schwierige anatomische Strukturen können einfacher erreicht werden
- Mehr Bewegungsmöglichkeiten in engen Räumen
- Effizientes Positionieren am Zielgewebe


Hohe Versiegelungsqualität

Durch die Möglichkeit der senkrechten Positionierung des Maulteils auf das Gefäß im 90° Winkel kann eine zuverlässige Versiegelung auch in schwierigen anatomischen Verhältnissen erreicht werden.

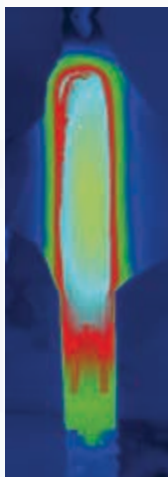

Minimierte Energie

Auch bei mehrmaliger Aktivierung des Instruments, werden die distalen Enden äußerlich nur minimal erwärmt (durchschnittlich 66° C). Gewebebeschädigungen können so verringert werden.

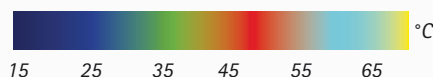

Testbericht der Aesculap AG.



Distales Schließen des Instruments durch patentierte Mechanik

Caiman bipolare Gefäßversiegelungsinstrumente verfügen über eine patentierte distal schließende Wippe. Diese ist der Schlüssel zur gleichmäßigen Gewebekompression und erleichtert das Greifen und Positionieren des Gewebes im Instrument.



Faxantwort



Ja, ich möchte...

- das Caiman System testen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
- ein Angebot zum Caiman System.
- die Produktbroschüre C90201
- noch Folgendes von Ihnen

Wie dürfen wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen?

* freiwillige Angaben

Name/Titel

Klinik

Abteilung/Funktion

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Tel.*

E-Mail*

Ja, ich bin einverstanden, dass mich die Aesculap AG und B. Braun Melsungen AG schriftlich über Angebote und Produkte informieren und meine Daten im B. Braun Konzernverbund weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Dazu genügt eine formlose E-Mail oder ein Brief an die unten angegebene Adresse.

Unterschrift

Senden Sie uns Ihre Antwort per Brief an:

Aesculap AG | Tamara Braun – VME | Tel. +49 (0) 7461 95-31316 | e-Mail: endoskopie@aesculap.de
Am Aesculap Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland

oder via Fax an: +49 (0) 7461 95-2131

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. +49 (0) 7461 95-0 | www.aesculap.de